



BEDIENUNGSANLEITUNG

Vor Gebrauch:

Warten Sie 10 Minuten nach der letzten Einnahme von Alkohol oder anderen Substanzen (Spray, Medikamente...), bevor Sie einen Test durchführen. Der maximale Blutalkoholspiegel wird 45 bis 60 Minuten nach dem letzten Glas Alkohol erreicht.

Auslegung:

1- Warten Sie, bis die Raute wieder vollständig rot wird. In Gegenwart von Alkohol färbt sich das Reagenzgrün.

2- Vergleichen Sie die erhaltene Farbe mit der Farbkarte (auf der Vorderseite dieses Merkblatts): Wenn die Farbe mit der im grünen Rechteck angegebenen Farbe vergleichbar ist, können Sie fahren.

Wenn die Farbe mit der im roten Rechteck angegebenen Farbe vergleichbar ist, haben Sie einen Blutalkoholspiegel, der über dem gesetzlichen Grenzwert liegt: **NICHT ANTREIBEN**.

3- Nach 10 Minuten ist eine Verdolmetschung nicht mehr möglich.

Die Ergebnisse dieses Tests können in keiner Weise im Widerspruch zu den Ergebnissen stehen, die die Polizei bei offiziellen Kontrollen erhält. Die Entscheidungen, die der Benutzer auf der Grundlage der Ergebnisse dieses Tests trifft, liegen vollständig in seiner eigenen Verantwortung. Sie können den Hersteller und/oder seine Händler nicht binden. Chemische Atemalkoholmessgeräte sind Indikatoren für den Blutalkoholspiegel und keine Messinstrumente.

Bei Zweifeln an Ihrer Auslegung raten wir Ihnen, nicht zu fahren.

Das Fahren nach Alkoholkonsum setzt den Fahrer, die Insassen und alle Verkehrsteilnehmer einem extremen Risiko aus.

Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Produkt ist eine Glasröhre und daher zerbrechlich. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verwenden Sie den Test nicht, wenn die Aluminiummembranen bereits perforiert sind, wenn das Glas gesprungen oder zerbrochen ist oder wenn das Reagenz bereits grün ist. Richten Sie den Test nicht auf eine Person, während Sie atmen. Nicht einatmen. Nicht schlucken. Wenn das Reagenz mit den Augen oder der Haut in Kontakt kommt, gründlich mit Wasser spülen und gegebenenfalls ärztlichen Rat einholen. Falls verschluckt, rufen Sie einen medizinischen Notfalldienst an (z.B. 15 oder 112). Nach Gebrauch aufgrund der Anwesenheit von Chemikalien im Alkoholtester in einem Abfallbehälter entsorgen.

Der Hersteller und seine Vertreter können nicht für eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung und/oder Nichtbeachtung der Vorsichtsmaßnahmen haftbar gemacht werden.



MODE D'EMPLOI

Avant utilisation:

Attendre 10 min après la dernière ingestion d'alcool ou d'autres substances (spray, médicament...) avant d'effectuer un test. L'alcoolémie maximale est atteinte 45 min à 60 min après le dernier verre d'alcool.

Interprétation:

1- Attendre que la pastille redevienne entièrement rouge. En présence d'alcool, le réactif se colore en vert.

2- Comparer la couleur obtenue à celles du nuancier fourni (sur le recto de cette notice): Si la couleur est comparable à celle indiquée dans le rectangle vert, vous pouvez conduire. Si la couleur est comparable à celle indiquée dans le rectangle rouge, vous avez une alcoolémie supérieure au taux **contraventionnel: NE PAS CONDUIRE**.

3- Au-delà de 10 minutes, l'interprétation n'est plus possible.

Les résultats de ce test ne peuvent en aucun cas être opposables à ceux obtenus par les forces de l'ordre, lors de contrôles officiels. Les décisions prises par l'utilisateur en fonction du résultat de ce test sont sous son entière responsabilité. Elles ne peuvent engager celle du fabricant et/ou de ses distributeurs. Les éthylotests chimiques sont des indicateurs d'alcoolémie et non des instruments de mesure.

En cas de doute sur votre interprétation, nous vous conseillons de ne pas conduire.

Conduire après avoir consommé de l'alcool fait courir des risques extrêmes au conducteur, ses passagers et tous les usagers de la route.

Précautions:

Ce produit est un tube en verre donc fragile. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser le test si les membranes d'aluminium sont déjà perforées, si le verre est fêlé ou cassé, ou si le réactif est déjà vert. Ne pas diriger le test vers une personne pendant le soufflé. Ne pas inspirer. Ne pas avaler. En cas de contact du réactif avec les yeux ou la peau, rincer abondamment avec de l'eau et demander si besoin un avis médical. En cas d'ingestion, appeler un service d'urgence médicale (par exemple le 15 ou le 112). A jeter dans une poubelle après utilisation en raison de la présence de produits chimiques contenus dans l'éthylotest.

L'utilisation non conforme à la notice et/ou le non-respect des précautions dégage le fabricant et ses distributeurs de toute responsabilité.



ISTRUZIONI D'USO

Prima dell'uso:

Attendere 10 minuti dopo l'ultima ingestione di alcol o altre sostanze (spray, farmaci...) prima di eseguire un test.

Il livello massimo di alcol nel sangue viene raggiunto da 45 min a 60 min dopo l'ultimo bicchiere di alcol.

Interpretazione:

1- Attendere che la losanga diventi di nuovo completamente rossa. In presenza di alcol, il reagente diventa verde.

2- Confrontare il colore ottenuto con quelli della cartella colori fornita (sul fronte di questo opuscolo):

Se il colore è paragonabile a quello indicato nel rettangolo verde, si può guidare.

Se il colore è paragonabile a quello indicato nel rettangolo rosso, si ha un livello di alcol nel sangue superiore al limite legale: **NON GUIDARE**.

3- Oltre i 10 minuti, l'interpretazione non è più possibile.

I risultati di questo test non possono in alcun modo essere opposti a quelli ottenuti dalla polizia durante i controlli ufficiali. Le decisioni prese dall'utente sulla base dei risultati di questo test sono interamente di sua responsabilità. Non possono vincolare il produttore e/o i suoi distributori. Gli etilometri chimici sono indicatori del livello di alcol nel sangue e non strumenti di misurazione.

In caso di dubbi sulla vostra interpretazione, vi consigliamo di non guidare.

Guidare dopo aver consumato alcolici mette a rischio il conducente, i passeggeri e tutti gli utenti della strada.


Precauzioni:

Questo prodotto è un tubo di vetro e quindi fragile. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare il test se le membrane di alluminio sono già perforate, se il vetro è incrinato o rotto o se il reagente è già verde. Non puntare il test su una persona mentre respira. Non inalare. Non inghiottire. Se il reagente viene a contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua e, se necessario, consultare un medico. In caso di ingestione, chiamare un servizio di emergenza medica (ad es. 15 o 112). Dopo l'uso, a causa della presenza di sostanze chimiche nell'etilometro, smaltire in un contenitore per rifiuti.

Il produttore e i suoi distributori non possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi uso non conforme alle istruzioni e/o per la mancata osservanza delle precauzioni.

**VERIFICA COLORI
NUANCIER
FARBPALETTE**

0.0g/l < Tasso < 0.5g/l
0.0g/l < Taux < 0.5g/l
0.0g/l < Grenzwert < 0.5g/l

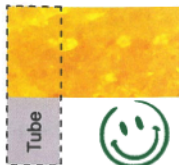

Tasso ≥ 0.5g/l
Taux ≥ 0.5g/l
Grenzwert ≥ 0.5g/l



Made by :
TURDUS TESTERS OF CAPACITY
48100 MARVEJOLS - FRANCE

turdus

TESTERS OF CAPACITY
www.turdus.fr



**FREE
DRIVE 0.50**
**ETILOMETRO
MONOUSO**

Attendere almeno
30 minuti dall'ultima
assunzione di alcol

Utilizzare: 5°C à 40°C
Conservazione: -20°C +70°C

turdus

TESTERS OF CAPACITY

1



IT: Riscaldare per 30 secondi
FR: Chauffer pendant 30 secondes
DE: 30 Sekunden lang erhitzen

2



IT: Premere le estremità
FR: Percuter les extrémités
DE: Klopfen an den Enden

3



IT: Inspirare profondamente e
soffiare lentamente
FR: Inspirez profondément et
souffler lentement
DE: Tief einatmen und langsam
pusten

4



IT: Smettere di soffiare non
appena il rettangolo corrisponde
ad uno dei tre casi
FR: Cesser de souffler dès que la
couleur de pastille correspond à
un des trois cas ci-contre
DE: Hören Sie auf zu blasen sobald
das Rechteck einem der folgenden
Fälle entspricht drei Fällen

5



IT: Interpretare FR: Interpréter
DE: Ablesen



3 700074 765313



MADE IN FRANCE